

HORIZON[®] S5



Concentrateur d'Oxygène Fixe de 5 Litres

Avec son design compact, Horizon[®] S5 et sa haute pureté d'oxygène, le concentrateur Horizon[®] S5 est un excellent choix pour votre prochain dispositif d'oxygénothérapie.

Très silencieux

Oxygène de haute pureté

Fiable

Simple et intuitif

SCALEO
MEDICAL

Innovative respiratory solutions

DIVISION CARDIO-RESPIRATOIRE

PRINCIPAUX AVANTAGES



ULTRA SILENCIEUX

Conçu par nos ingénieurs français, **Horizon® S5** produit un niveau sonore de 45 dB, quel que soit le débit sélectionné.



LÉGER

Grâce à son design ergonomique et compact, **Horizon® S5** pèse seulement 15 kg réduisant ainsi les coûts de livraison et de stockage. Ses roues pivotantes facilitent sa mobilité au domicile du patient ou en établissement de santé.



FIABLE

Nous savons que la fiabilité est la caractéristique la plus importante qu'un patient recherche pour son concentrateur d'oxygène. C'est la raison pour laquelle, utilisable 24h/24 et 7j/7, **Horizon® S5** délivre une concentration en oxygène de 93% ($\pm 3\%$) de pureté quelle que soit la position sélectionnée.



CONVIENT À TOUS TYPES DE PRESCRIPTION D'OXYGÈNE

Grâce à sa molette de contrôle flexible, l'**Horizon® S5** s'adapte à toutes les prescriptions d'oxygène.



LA SÉCURITÉ EN PRIORITÉ

Horizon® S5 est équipé d'une buse de sortie en aluminium et d'un disjoncteur protégeant l'appareil de tout dysfonctionnement électrique. Un système d'alarme complet s'active lorsque la pureté de l'oxygène diminue en dessous de 82%.



ENTRETIEN FACILE

Contrôle et maintenance en respect de la réglementation française. Pour autant, de simples mesures d'hygiène sont suffisantes pour assurer une longue durée de vie des filtres et des pièces internes.



RENTABLE

Sa faible consommation d'énergie se traduit par une solution rentable pour les patients sous oxygénothérapie à long terme. Cela permet également à l'appareil de produire moins de chaleur.



SIMPLE ET INTUITIF

Le réglage simple et intuitif du concentrateur d'oxygène **Horizon® S5** permet l'accessibilité aux patients ayant des capacités sensorielles limitées.


CARACTÉRISTIQUES CLÉS & PACK

LE PACK HORIZON S5


Horizon® S5 est proposé avec tout ce qui est nécessaire pour son utilisation immédiate.

Le pack inclut:


- Concentrateur d'oxygène Horizon® S5
- Manuel utilisateur
- Humidificateur
- Tube connecteur pour humidificateur
- Filtre compresseur de rechange
- Lunette à oxygène

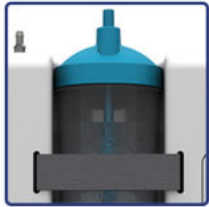

Bandes velcro permettant une utilisation facile.

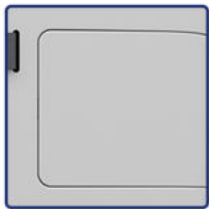

Filtres facilement accessibles

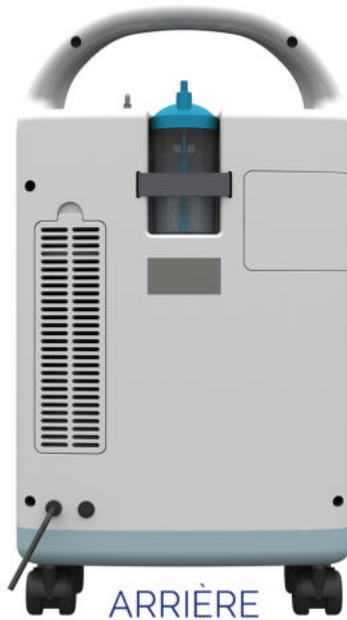

ARRIÈRE



AVANT



Délivre de l'oxygène jusqu'à 5 LPM



Roues pivotantes avec freins.



Durabilité pour une utilisation intensive

SCALEO
MEDICAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x H	24 x 38 x 66 cm	Tension et Fréquence	220V ±22V / 50HZ ±1 HZ
Poids	15 kg	Compatibilité de l'humidificateur	Tous types approuvés
Niveau sonore	≤45 dB (A)	Pression de sortie	0.05±10% MPa
Pureté de l'oxygène	93% (±3%)	Tolérance Environnementale	Température : +10 à +37°C Humidité relative : 20 à 65%
Mode opérationnel	Flux continu	Tolérance environnementale de stockage	Température : -30 à + 70°C Humidité relative : 15 à 95%
Volume d'O ₂ /minute	0,5 - 5 LPM	Garantie	3 ans
Durée opérationnelle	24/7		
Consommation énergétique	320 W		



SCALEO
M E D I C A L

Développé par

SCALEO Medical - 107, rue Dassin - 34080 Montpellier - France

Tel. 04 67 72 94 86 - Fax 04 99 74 01 79

www.scaleomedical.com - info@scaleomedical.com

 Sysmed (China) Co., LTD.

CE